


mamajoo®

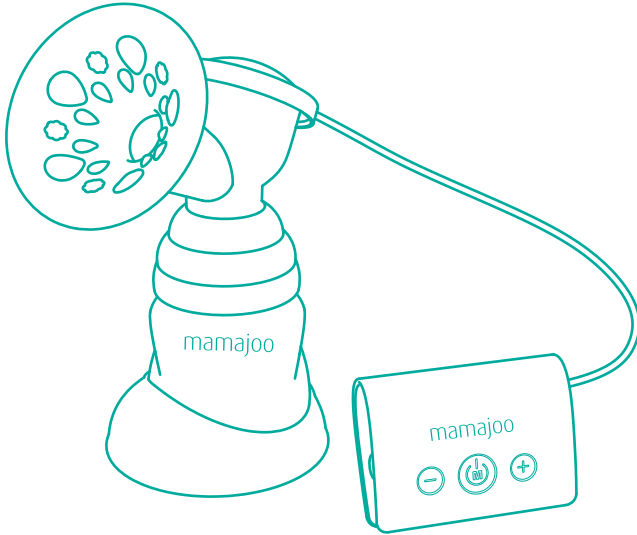

TR Mamajoo Elektronik Tekli Göğüs Pompası

EN Mamajoo Electronic Single Breast Pump

www.mamajoo.com

TR Değerli Tüketicimiz,

Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmenizi dileriz. Mamajoo ürünlerinin üretim sürecinde anne ve bebek sağlığı ön planda tutularak en son teknoloji ile Avrupa Birliği standartlarına uygun en yüksek kalitede, gıdaya uygun ve BPA içermeyen ham maddeler kullanılmıştır. Ürünlerimizle ilgili bilgiler ve sorularınız için bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. İleride gerekebileceğinden, lütfen bu kılavuzu saklayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Gelişmiş akıllı mikroişlemci teknolojisi ile tam kontrol sağlar.
- İşlem ve işaretler LED gösterge ile kolayca izlenir.
- Mobil kullanımlar için harici şarj cihazı (powerbank) ile kullanım imkanı sunar. Harici şarj cihazı minimum 2600 mAh gerçek değerinde olmalıdır.

Adaptör: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC

Çalışma süresi: 0-30 dakika **Ağırlık:** 0.150 kg

EN Dear Consumer,

Thank you for choosing Mamajoo products and we wish you to raise your baby with health and happiness. Mamajoo products are produced with highest quality BPA free raw materials that meet the stringent EU standards combined with the latest technology, with health of mothers and babies a priority. For more information and questions about our products, you can find our contact details at the end of this instructions leaflet. Please keep this leaflet for future references.

TECHNICAL FEATURES

- The advanced intelligent microprocessor technology provides complete control.
- Processes and signs can be easily monitored from the LED indicator.
- It can be used with an external charger (powerbank) for mobile use. External charger must have min. 2600 mAh real capacity.


Adaptor: Input: 100-240V~50/60Hz Output: 5-6V 1A DC

Run Time: 0-30 minutes **Weight:** 0.150 kg

UYARILAR

1. Ürünü kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.
2. Anne sütüyle temas etmediklerinden motor ünitesi ve aksamı, elektrik adaptörü ile hava tüpü ve girişleri **(k, l, m, n)** temizlenmez veya steril edilmez, aksi halde bu parçalardan geçecek olan su motora zarar verir. İlk kullanımdan önce pompanızın anne sütü ile temas eden tüm parçalarını sökünüz, ılık sabunlu su ile elde yıkayıp iyice durulayınız ve Mamajoo sterilizatörlerini kullanarak veya 5 dakika suda kaynatarak steril ediniz. Kaynar su dezenfeksiyonu sırasında, biberonun veya diğer parçaların tencerenin kenarına temas etmemesini sağlayın. Bu, geri dönüşü olmayan ürün hasarına neden olur ve bu hasarlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıca her kullanımdan sonra tüm parçaları temizleyin ve yine her kullanımdan önce tüm parçaları steril edin. Pompa bileşenlerinin hasar görmemesi için tavsiye edilenden daha uzun süre steril etmeyiniz.
3. Motor ünitesi ve aksamı, elektrik adaptörü ile hava tüpü ve girişleri **(k, l, m, n)** gibi anne sütü ile temas etmeyen parçaları ASLA suya ve neme maruz bırakmayınız, ıslak bez ile temizlemeyiniz.
4. Ürüne zarar verebileceği ve çatlamalara neden olabileceğinden anti bakteriyel deterjan ve temizleyicilerle temizlemekten kaçınınız. Böyle bir durum olduğunda bu parçaları kullanmayınız.
5. Mamajoo Elektronik USB Göğüs Pompalarını SADECE orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Her kullanımdan sonra kapalı olduğunu kontrol ediniz ve prizden çıkartınız. Böylece hem enerji tasarrufu yapmış hem de ürünün ömrünü uzatmış olursunuz.
6. Motor ünitesinin zarar görmemesi için süt sağım / saklama kabının kapasitesini aşmayınız. 120 ml den daha fazla süt sağlıyorsanız, lütfen büyük biberon gövdesi kullanınız.
7. Bebeklerin ve küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
8. Çok sert ve hızlı sağım ritmi ağrıya neden olabileceğinden pompanın çekim gücünün size uygun olduğundan emin olunuz. Mastit gibi özel durumlar dışında göğüs pompanızı son kademedede kullanmamanızı öneririz.
9. Konfor başlığı pompa gövdesine tam olarak oturmadığında süt dışarı akacağından her kullanımda kontrol ediniz.
10. Bir sorun olduğunda, ürünü fişten ya da USB kaynağından çıkartınız. Servis gerekli olduğunda, sizi yetkili teknik servisimize yönlendirebilmemiz için bizimle iletişime geçiniz.
11. Süt sağarken göğsünüzün kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz.
12. Kullanım kurallarına her zaman uyunuz. Firmamız uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumlu tutulamaz.
13. Göğüs pompasını banyo ya da duş yaparken kullanmayın.
14. Göğüs pompasını küvet veya lavabo yakınında tutmayın ve saklamayın.

- 15.**Suya düşmüş bir ürünü almaya kalkışmayın. Derhal fişini çekin.
- 16.**Kullanımdan hemen sonra mutlaka göğüs pompasının fişini prizden çekin.
- 17.**Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır. Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- 18.**Boğulma tehlikesi oluşturabileceğinden, çocukların veya hayvanların motor ünitesi, adaptör veya aksesuarlarla oynamasına izin vermeyin.
- 19.**Her kullanımdan önce göğüs pompasında ve adaptörde herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyin. Adaptör veya fişi zarar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa, suya batmış ya da düşmüşse göğüs pompasını kullanmayın.
- 20.**Göğüs pompasını aerosol sprey ürünlerin kullanıldığı veya oksijen verilen dış mekanlarda kullanmayın.
- 21.**Göğüs pompası hava, oksijen veya azot oksit ile yanıcı anestetik karışımın bulunduğu ortamlarda kullanıma uygun değildir.
- 22.**Göğüs pompasının motor ünitesi içinde kullanıcı tarafından değiştirilebilecek parça bulunmamaktadır. Göğüs pompasını açmaya, bakım ve onarımını yapmaya kalkışmayın. Aksi takdirde garantiniz geçersiz kalacaktır.
- 23.**Adaptör ve silikon kabloları sıcak yüzeylerden uzak tutun. Yalnızca cihaz üzerinde belirtilen adaptörü kullanın.
- 24.**Vakum altındayken pompa gövdesini göğsünüzden ayırmaya çalışmayın. Cihazı kapatın, göğsünüz ve göğsünüzü tutan silikon konfor başlığı arasına parmağınızı yerleştirerek pompayı göğsünüzden ayırın.
- 25.**Pompalama doğum sancısına neden olabileceğinden hamileyken göğüs pompasını kesinlikle kullanmayın.
- 26.**Uykuluyken göğüs pompasını kesinlikle kullanmayın.
- 27.**Göğüs pompasını aşırı sıcak ortamlara, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- 28.**Süt sağımına her zaman süt salgılama refleksinizi uyarıp süt gelmeye başlaması için önce masaj modunda başlayınız. Sütünüzü sağlamadıysanız, bir seferde 5 dakikadan fazla pompalayın. Gün içinde başka bir zaman sağlamayı deneyin. İşlem çok rahatsız veya acılı hale gelirse, pompayı kullanmayı bırakın ve emzirme danışmanınıza başvurun.
- 29.**Her kullanımdan önce ürünü kontrol ediniz ve yıpranmış parçalar varsa değiştiriniz. Yıpranmış parçalarla sağım yapılması motor ünitesine süt sızmasına ve bozulmasına neden olabilir. Hava tüpü, valf ve diyafram gibi silikon parçalar kullanıma bağlı yıprandığından 4-12 hafta arası, diğer parçalar hasar gördüğünde değiştirilmelidir.
- 30.**Silikon valfin (f) temizliği doğru yapılmadığında tıkanır ve doğru sağım yapamazsınız. Her kullanımdan sonra valfi çıkarıp süt kalıntılarını iyice temizleyin.

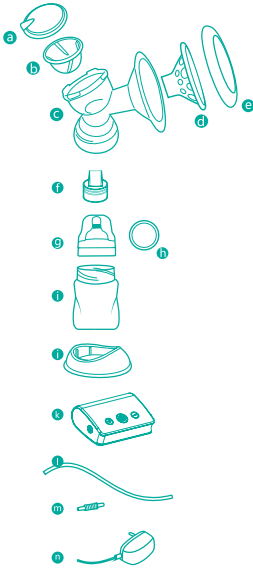

Ürün içeriği

- a) Silindir kapak
- b) Silikon diyafram
- c) Pompa gövdesi
- d) Silikon konfor başlığı
- e) Pompa hijyen kapağı
- f) Silikon valf
- g) Biberon emziği, kapağı ve kapatma halkası
- h) Biberon kapatma disk
- i) Anne sütü saklama kabı (160 ml)
- j) Anne sütü saklama kabı denge tabanlılığı
- k) Motor ünitesi
- l) Hava tüpü
- m) Hava tüpü - motor ünitesi giriş parçası
- n) AC/DC adaptörü ve kablosu

ASLA bu parçaları steril etmeyiniz: **k, l, m, n**

BAKIM


1. Motor ünitesini SADECE kuru bir bezle temizleyiniz. Ürünü temizlemek için parlaticı, aşındırıcı veya anti-bakteriyel malzemeler kullanmayınız.
2. Hava tüpü bağlantılarının tam ve silikon valfin herhangi bir zarar görmemiş olduğunu düzenli olarak kontrol ediniz.
3. Pompa gövdesi ve süt saklama kapları bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir ancak gıdalardan gelen renklerden dolayı renk değişimi olabilir.



Hortum steril edilmemeli ve yıkanmamalıdır. Hortumun içinde kalan su, motor parçalarına zarar verir.

MONTAJ

Pompayı elinize almadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Kullanmadan önce göğüs pompanızın anne sütü ile temas eden parçalarını yıkayıp steril ediniz.

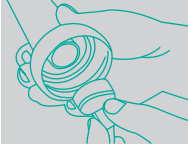


Valfi pompa gövdesine iterek sıkıca takınız.



Silikon diyaframı pompa gövdesine yerleştiriniz ve tam oturduğundan emin olunuz.




Silindir kapağı iyice yerleştiriniz

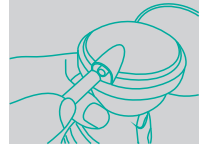


Silindir kapak üzerinde bulunan girişe hava tüpünün ucunu takınız.




Sağım yapacağınız süt saklama kabı/biberonu pompa gövdesine takınız.

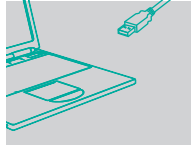

Mobil kullanımlar için USB girişinizi uygun olan bir cihazın USB kaynağına takabilirsiniz.

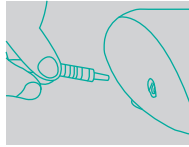

Hava tüpünün diğer ucunu motor ünitesinin hava girişine sıkıca takınız.

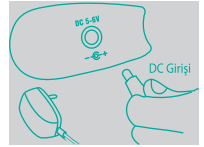

Adaptör kablosunun ucundaki metal fişi motor ünitesindeki adaptör girişine [5V-6V] sıkıca takıp adaptör fişini elektrik prizine [110V-220V] takınız.

LED GÖSTERGE KILAVUZU


5 Farklı masaj modu seçeneği



10 Farklı çekim gücü seçeneği

Kontrol Paneli

- a) Masaj konumu
- b) Çekim konumu
- c) Açma/Kapama ve masaj/çekim konum değiştirme tuşu
- d) Çekim azaltma tuşu
- e) Çekim artırma tuşu
- f) LED seviye göstergesi

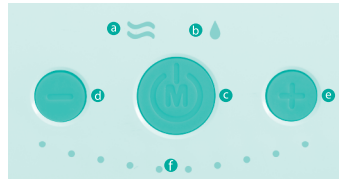

ÇALIŞTIRMA

Adaptör ile :

1. Pompanızın doğru monte edildiğinden emin olunuz.
2. Kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir koltuğa oturunuz ve pompayı daha rahat kullandığınız elinize alınız. Lütfen pompanızı yatarak kullanmayınız.
3. Pompanızın konfor başlığını göğüs ucunuzu ortalayacak şekilde yerleştiriniz ve hava almaksızın göğsünüze tam oturduğundan emin olunuz.
4. Ürünü fişe takınız, "Açma/Kapama" tuşuna basarak çalıştırınız ve çekim işlemini başlatınız. Sütünüzün kolayca gelmesini sağlamak için pompanızı önce masaj konumunda kullanmanızı öneririz.
5. Mamajoo göğüs pompaları bebeğin doğal emme ritmini taklit eder.
- 5.1. Mamajoo Elektronik USB Tekli Göğüs Pompasının Açma/Kapama tuşuna bir kez bastığınızda sol üstteki masaj modu LED göstergesi, ikinci kez bastığınızda sağ üstteki çekim modu LED göstergesi yanacaktır. Masaj modu, bebeğin anneyi emmeye başladığında yaptığı gibi sütün gelmesini sağlayan "let-down" refleksini uyarmak içindir. Masaj modu olan ilk 5 kademede her 10 kısa çekimden sonra bir uzun çekim gerçekleşir ve sütünüz gelmeye başladığında "Açma/Kapama" tuşuna tekrar basarak çekim moduna geçebilirsiniz. Çekim modunda 1-10 arası istediğiniz çekim gücü kademelerini seçebilirsiniz ve "+" veya "-" tuşları ile size uygun olan çekim gücünü ayarlayabilirsiniz. Göğüs ucu problemleri ve hassasiyetleri olan anneler masaj modunda da sağım yapabilir. Mamajoo Elektronik USB Tekli Göğüs Pompası, akıllı mikro işlemci teknolojisi ile en son bıraktığınız kademeleri hafızasına kaydeder. Bir sonraki kullanımda pompanız masaj modunda ve o kademelerde açılacaktır.
6. Sağım işlemini bitirdiğinizde, göğüs pompanızın "Açma/Kapama" tuşuna 2 saniye basarak kapatınız ve ürünü prizden çıkartınız. Sağım yaptığınız anne sütü saklama kabını pompa gövdesinden çıkartınız. Saklama kabının ağzını Mamajoo kapatma halkası ve diski ile kapatarak anne sütünü buzdolabında veya dondurucuda saklayabilir ya da biberon emziği takarak doğrudan bebeğinizi besleyebilirsiniz.
7. Mamajoo Elektronik USB Göğüs Pompaları, akıllı mikroişlemci teknolojisi ile 30 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.

Harici şarj ile:

Prensipite ürünün harici şarj ile çalıştırmada herhangi bir fark bulunmamakla birlikte, adaptör ile priz bağlantısı yerine ürünü dolu olduğundan emin olduğunuz bir harici şarj cihazına (powerbank, bilgisayar vb) USB bağlantı noktası ile bağlayabilirsiniz. Kullandığınız harici şarj kaynağının gücünün doğruluğundan emin olunuz. [Bkz Teknik Özellikler]

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : MAMAJOO SAĞLIK ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
Adresi : Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No: 77/2
: Sultanbeyli / İstanbul -TÜRKİYE
Telefon : +90 (216) 573 62 00
Fax : +90 (216) 573 62 09
E-Posta : destek@grupbaby.com

FİRMA YETKİLİSİ

İmzası ve Kaşesi :

MAMAJOO SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No:77/2
Sultanbeyli / İST. Tuncel Sici/ NO: 679300
Sultanbeyli / İstanbul / 34444 6044

MALIN

Markası : Mamajoo
Cinsi/Modeli : Elektronik USB Tekli Göğüs Pompası / MMJ4722
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 İş günü
Garanti Süresi : 2 yıl

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :

Tel - Fax :

Fatura Tarihi ve No :

Tarih - İmza - Kaşe :

GARANTİ ŞARTLARI


TR

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Kullanım ömrü ise 5 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. Ürünün kullanımı ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir. Herhangi bir garanti talebinde bulunmak için lütfen satın alma faturanızı ve garanti belgesinin dahil olduğu kullanım kılavuzunu saklayınız.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Ürünün taşıma ve nakliye esnasında orijinal ambalajında, kutu üzerinde belirtilen taşıma yönü dikkate alınarak, yüksek dereceli sıcaklıklardan, ateşten ve darbelerden korunarak taşınmalıdır; ıslak ve rutubetli ortamlarda muhafaza edilmemelidir.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
7. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Tüketicie sağlanan seçimlik haklara ilişkin;
Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 11. Maddesinde yer alan;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme
 - Satılanı alıkoyup ayp oranında satış bedelinden indirim isteme
 - Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
10. Bu garanti belgesi, ileride yapılacak yasal değişikliklerde tüketici lehine olan tüm değişiklikleri kapsamakta olup tüketici lehine olan tüm hükümleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Tüketiciler şikayet ve itiraz konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve ikamet ettiği ilçenin tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
11. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
12. Tüketicie, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili çıkabilecek uyumsuzluklarda başvurularını tüketici mahkemelerine ve ikamet ettiği ilçenin tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

ATTENTION

1. Please read the instruction manual carefully before using this product.
2. Do not clean or sterilize the motor unit and its components, the electrical adapter and the air tubing and their inlets as they are not in contact with breast milk, otherwise the water that passes through may damage the motor unit. Before first use, remove all parts of your pump that come in contact with breast milk, hand wash them thoroughly with warm soapy water, rinse them thoroughly and sterilize them using Mamajoo sterilizers or by boiling them in water for 5 minutes. While boiling, make sure the parts do not make contact with the sides of the pot, as this may result in irreversible damage which you will be responsible for. Clean all parts after each use and sterilize all parts before each use. To prevent damage to the pump components, do not sterilize longer than recommended.
3. NEVER expose parts that do not come into contact with breast milk, such as the motor unit and its components, electrical adapter, air tubing and inlets to water or moisture, do not clean with a wet cloth.
4. Avoid cleaning with anti-bacterial detergents and cleaners that may cause damage or cracking on the product. In such a case please do not use the damaged pieces.
5. Use Mamajoo Electronic USB Breast Pumps with ONLY the original adapter. Check if it turns off correctly after each use and unplug the power cord. This way, you save energy and extend the life of the product.
6. Do not exceed the capacity of the breast milk storage / feeding container to avoid motor unit damage. If you get more than 120 ml milk when you pump please use a larger feeding bottle.
7. Keep out of reach of children and babies.
8. Extra hard and fast milk expression may cause pain so that please ensure the power is right for you. We do not recommend you to use your breast pump at the last suction mode except in special cases such as Mastitis.
9. Please check before each use that the comfort cushion fits correctly to the funnel, otherwise milk can leak out.
10. When a problem occurs, unplug the power cord or remove the product from the USB source. In case of any requirements of service, please contact us to direct you to our technical customer service.
11. Make sure your breast is dry and clean before pumping.
12. There should be strict compliance with the instructions. Our company will not be held responsible for any damage caused by improper use.
13. Do not use the breast pump in the bath or in the shower.
14. Do not place or store the breast pump near a tub or sink.
15. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
16. Always unplug the breast pump immediately after use.

- 17.** This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
- 18.** Do not allow children or pets to play with the motor unit, the adapter or accessories, as these parts may pose a choking hazard.
- 19.** Inspect the breast pump, including the adapter, for signs of damage before each use. Do not use the breast pump if the adapter or plug is damaged, if it does not work properly, if it has been dropped or submerged in water.
- 20.** Do not use the breast pump outdoors where aerosol spray products are used or where oxygen is administered.
- 21.** The breast pump is not suitable for use in the presence of flammable anaesthetic mixtures with air or with oxygen or nitrous oxide.
- 22.** There are no user serviceable parts inside the motor unit of the breast pump. Do not attempt to open, service or repair the breast pump yourself. If you do, your guarantee will be voided.
- 23.** Keep the adapter and the silicone tubes away from heated surfaces. Only use the adapter indicated on the appliance.
- 24.** Do not attempt to remove the pump body from your breast while under vacuum. Switch off the appliance and break the seal between your breast and the pump funnel with your finger. Remove the pump from your breast.
- 25.** Never use the breast pump while you are pregnant, as pumping can induce labour.
- 26.** Never use the breast pump while you are sleepy.
- 27.** Do not expose the breast pump to extreme heat and do not place it in direct sunlight.
- 28.** Always start milk expression at massage mode to stimulate the lactation reflex. Do not continue pumping for more than 5 minutes at a time if no milk is being expressed. Try to express at another time during the day. If the process becomes very uncomfortable or painful, stop using the pump and consult your breastfeeding advisor.
- 29.** Check the product before each use and replace any worn parts. Expressing milk with worn out parts may result motor unit damage due to milk leakage to the motor unit. Silicone units such as the air tube, valve and diaphragm should be changed every 4-12 weeks as they become worn depending on usage. Other parts should be changed when damaged.
- 30.** The silicone valve (f) can be clogged if not cleaned properly, making proper milk expression impossible. After each use, remove the duck valve and clean it thoroughly to remove any residual milk.

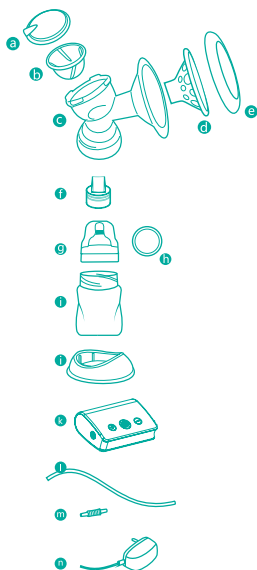

Product components

- a)** Cylinder Cover
- b)** Silicone Diaphragm
- c)** Pump Body
- d)** Silicone Comfort Cushion
- e)** Hygiene Cover
- f)** Silicone Valve
- g)** Bottle Teat, Cap & Sealing Ring
- h)** Bottle sealing disc
- i)** Breasts milk storage container (160 ml)
- j)** Breast milk storage container base
- k)** Motor unit
- l)** Air tube
- m)** Air tube – Motor unit insert
- n)** AC/DC adapter and cable

NEVER sterilize these parts: k, l, m, n

MAINTENANCE


- 1.** Clean the motor unit **ONLY** with a dry cloth. Do not use polishing, abrasive or anti-bacterial detergents.
- 2.** Check regularly that the air tube connections are made correctly and the silicone valve is not damaged.
- 3.** The pump body and the breast milk storage containers can be washed safely in a dishwasher. However a color change can occur due to foods.



The air tube should not be sterilized or washed. The water left in the tube may destroy the motor part.

HOW TO ASSEMBLE

Before starting to assemble, please wash your hands.
Before using wash and sterilize the mechanical pieces of the breast pump.

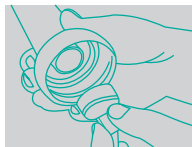


Push the valve to the pump body tightly.



Place the silicone diaphragm onto the pump body and make sure it fits comfortably.




Place the cylinder cover onto the pump body.

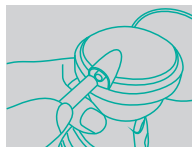


Insert the end of the air tube into the air port of the cylinder cover




Screw breast milk storage container to the pump body.

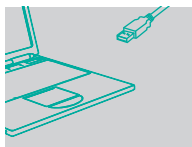

Insert the USB plug into the USB source output for mobile use.

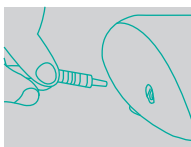

Insert the other end of air tube into the port of the motor unit.

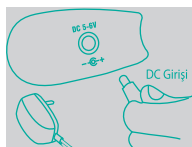

Insert the metal plug at the end of adapter into the adapter input on the motor unit (5V-6V) and plug in the adapter (110V-220V).

LED INDICATOR MANUAL




5 different message mode options



10 different suction mode options

Control Panel

- a) Massage position
- b) Suction position
- c) On/Off and massage/suction mode switching button
- d) Suction decrease button
- e) Suction increase button
- f) LED level indicator

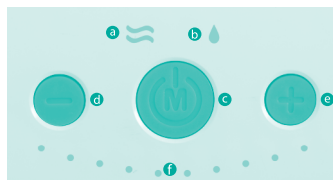

OPERATION

With Adapter:

1. Make sure the breast pump is assembled correctly.
 2. Sit on a comfortable chair and relax, hold the pump with your hand which you feel comfortable with. Do not use breast pump in leaning position.
 3. Center the pump funnel with the comfort cushion over your nipple. Make sure it seals your breast completely.
 4. Plug in and press 'On/Off' button to start suction. We recommend you to start with massage mode to stimulate your milk flow.
 5. Mamajoo Breast Pumps mimic baby's natural suckling rhythm.
- 5.1** When you press the On/Off button of Mamajoo Electronic USB Single Breast Pump one time, indicator LED at the upper left lights up for the massage mode, if you press the button for a second time indicator LED at the upper right lights up for the suction mode. The massage mode is to alert the 'let-down' reflex which is similar to the baby starting to suck the mother's breast. At the first 5 levels for the massage mode; after every 10 short pulls a long pull occurs, when your milk starts to flow press the "On/Off " button again and switch the suction mode. You can select the desired expression mode between 1-10 power levels and with "+" or "-" buttons you can adjust suction power. Mothers with nipple problems and sensitivities can also express milk in massage mode. Mamajoo Electronic USB Single Breast Pump saves in memory the last steps you used with its intelligent microprocessor technology. At your next use, the breast pump will start on massage mode and on the last level you used.
6. When the expression is finished, press the "On/Off" button for 2 seconds and unplug it. Take out the breast milk storage container from the pump. Place the Mamajoo sealing disc on the breast milk container and put it into the fridge or the freezer or feed your baby directly.
 7. Mamajoo Electronic USB Single Breast Pump automatically shuts off after running for 30 minutes with its intelligent microprocessor technology.

With an External Charger:

In principle, there are not many differences when operating the product with an external charger. Instead of plugging it in with an adapter you can use a fully charged external charger (power- bank, computer etc.) Make sure that the external charger power source is correct. (See Technical Features)

WARRANTY

1. This product is under guarantee of our company for 2 years after date of purchase for the first user. Please contact us or the retailer that you purchased the product from for warranty claims.
2. This warranty does not cover wear occurring from regular use, defects and damages caused by misuse, abuse and improper storage, failure to comply with the manual instructions and malfunctions from using improper components.
3. The responsibility of the usage the product belongs to the user.
4. Please keep your receipt as a proof of purchase for any warranty claims.



FOR SERVICE POINTS
SERVİS NOKTALARI İÇİN

Üretici / Manufacturer

mamajoo Sağlık Ürünleri A.Ş.

Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No:77/2
Sultanbeyli-İSTANBUL Tel: 0216 573 62 00 (pbx)

E-mail:info@mamajoo.com

mamajoo GmbH

E-mail:info@mamajoo.de

www.mamajoo.com



mamajoo